


Guía Rápida: Crear una Prestación con una Prueba

Cómo asociar una prueba ya creada a una nueva prestación, dejándola lista para el flujo normal.

Paso 1 Crea la prestación


Ve a Ajustes → Mantenedores → Prestaciones y haz clic en Nueva Prestación. Completa el formulario (el Código Fonasa es opcional) y presiona Grabar. Luego activa el check Mostrar Filtros y busca la prueba que vas a asociar.

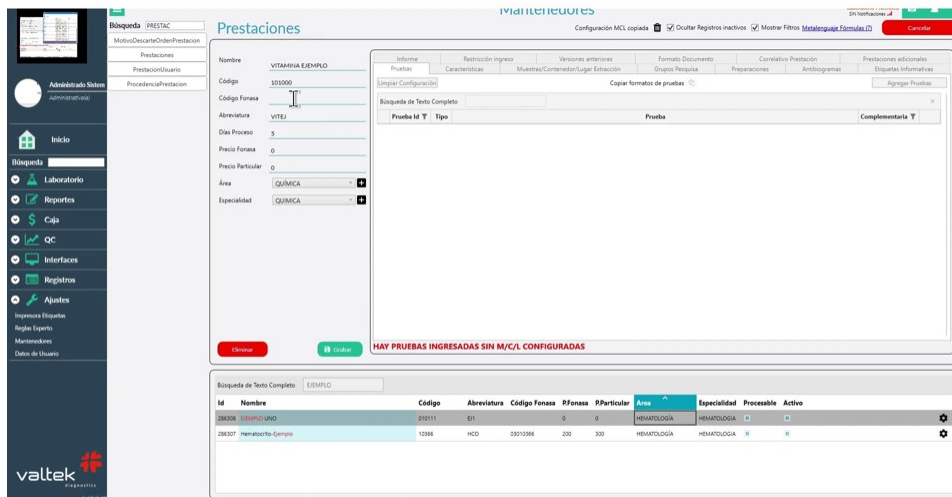

Id	Nombre	Código	Abreviatura	Código Fonasa	P.Fonasa	P.Particular	Área	Especialidad	Procesable	Activo
28018	VITAMINA D	28018	VD	030108	0	0	HEMATOLOGIA	HEMATOLOGIA	*	*
28037	Hemograma-Completo	10384	HCD	030108	200	300	HEMATOLOGIA	HEMATOLOGIA	*	*

Paso 2 Agrega la prueba a la prestación

Haz clic en el engranaje de la prestación; la verás vacía. Debes agregar una prueba: búscala, selecciónala y presiona Agregar Pruebas. Cierra ese apartado y presiona Grabar.

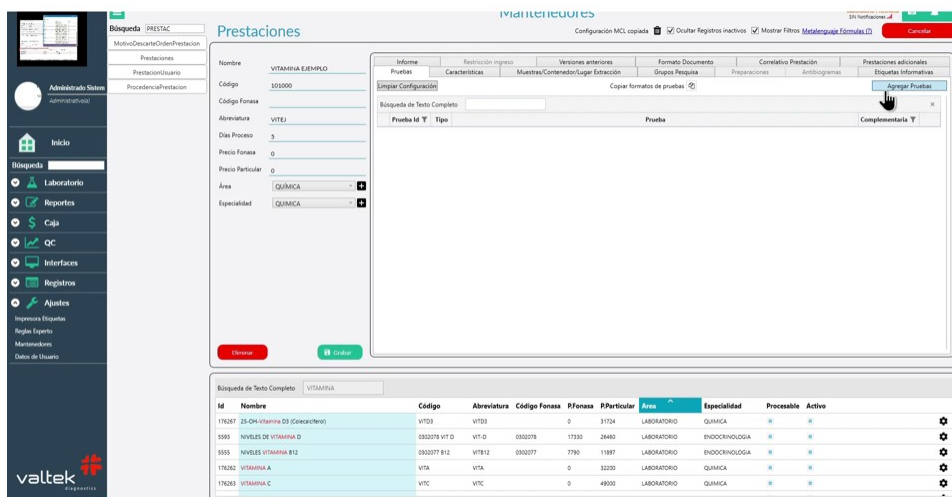

Id	Nombre	Código	Abreviatura	Código Fonasa	P.Fonasa	P.Particular	Área	Especialidad	Procesable	Activo
17020	25 OH-VITAMINA D3 (Colecalciferol)	VITD3	VITD3	0	0	0	LABORATORIO	QUIMICA	*	*
0000	NIVEL DE VITAMINA D	0000070	VT-D	0302070	0	0	LABORATORIO	ENDOCRINOLOGIA	*	*
0000	NIVEL DE VITAMINA B12	0000070	VT-B12	0302070	0	0	LABORATORIO	ENDOCRINOLOGIA	*	*
17020	VITAMINA A	VITA	VITA	0	0	0	LABORATORIO	QUIMICA	*	*
17020	VITAMINA C	VITC	VITC	0	0	0	LABORATORIO	QUIMICA	*	*

Paso 3 Configura muestra, contenedor y lugar de extracción

Si al grabar aparecen letras en rojo, falta configurar la muestra, el contenedor y el lugar de extracción. Ve a la pestaña correspondiente, activa Pruebas por Configurar, selecciona los checks según tus requerimientos y presiona Almacenar Configuración. Finalmente, presiona Grabar: la prestación quedará lista para el flujo normal.

[illegible]

 **Tip:** las letras rojas al grabar son la señal del sistema de que falta configurar muestra/contenedor/lugar de extracción — no es un error, solo un paso pendiente.